



# 實驗讚報 LAB NEWS FLASH

Shopping!

單筆額滿 **16,800** 元  
送網購提袋

精選優惠 限時折扣 新品上市

活動期間 **2026 07.01 ▶ 09.30**



#GIFT 00-00029  
30×40×10 cm  
限購買本目錄產品  
單筆消費不累贈，送完為止

## Roche

### AVENIO Edge System 全自動化 NGS 建庫系統

可搭配  AVENIO Tumor Tissue CGP Kit V2  
 羅氏 KAPA 建庫試劑


**WGS**  
whole-genome sequencing

**WES**  
whole-exome sequencing

**TE**  
target enrichment

- ① KAPA EvoPlus V2 Auto Kit
- ② KAPA EvoAmp RM Auto Kit
- ③ KAPA HyperCap V2 Auto Kit

**KAPA 全新建庫試劑組**  
效率與品質全面升級

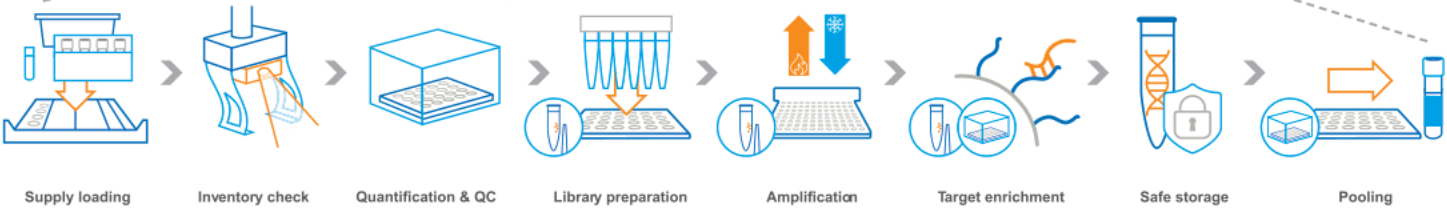

研毅企業有限公司 ANTEC Bioscience Inc  
 www.antec-bio.com.tw 0800-363-666  
 台北 02-2758-5928 新竹 03-530-7572 台中 04-2463-8312 台南 06-336-9665 高雄 07-342-7336



SYBR 系列 購買 **50**

Probe 系列 購買 **20** 支 ▶ **送** SARTORIUS 手動移液器 TACTA 單爪

2G PCR 系列 購買 **20** 支

市場公認最精確性 實驗結果最可靠



傑出設計獲得德國紅點設計獎肯定




## KAPA SYBR® FAST qPCR Kit

高效速成，數據不失真

95 °C 3min  
95 °C 3sec  
60 °C 20sec } 40 cycles

貨號	產品	包裝
KK4600	KK4600 KAPA SYBR FAST UNI	1 mL (100 rxns)
KK4609	KK4609 KAPA SYBR FAST LC480	1 mL (100 rxns)
KK4619	KK4619 KAPA SYBR FAST ROX LOW	1 mL (100 rxns)

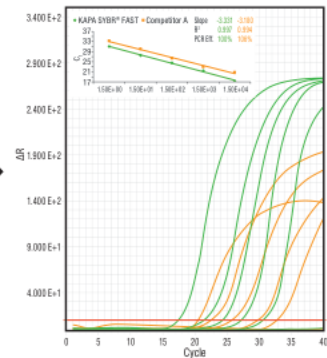


## KAPA2G Fast ReadyMix with dye

不需添加 loading dye，PCR 更快速

95 °C 3min  
95 °C 15sec  
60 °C 15sec } 35 cycles

95 °C 3min  
95 °C 30sec  
60 °C 30sec  
72 °C 1min } 35 cycles

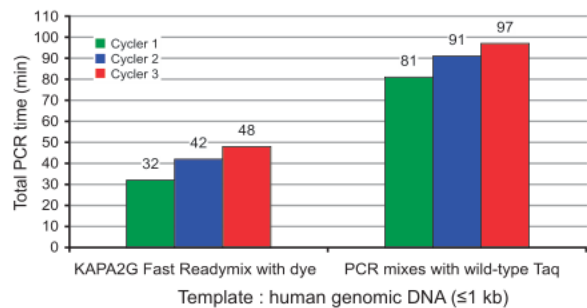

貨號	品名	包裝
KK5603	KAPA2G Fast HotStart ReadyMix	100 x 25 $\mu$ l rxns
KK5608	KAPA2G Fast HotStart ReadyMix with dye	100 x 25 $\mu$ l rxns


#KK4701 / 1 mL (100 rxns)

## KAPA PROBE FAST qPCR Kit

探針定量，快！狠！準！

95 °C 3min  
95 °C 3sec  
60 °C 20sec } 40 cycles

Template : human genomic DNA  
(1.5-fold dilutions over a 89 - 450 copies per reaction range)

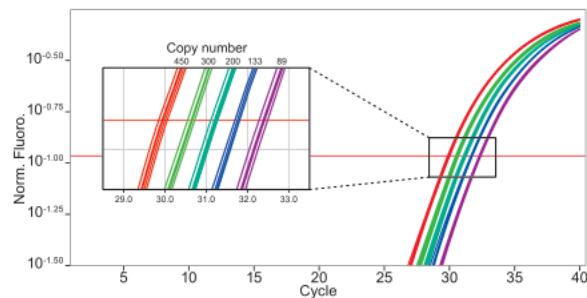

百元加購



# RT - PrimeScript / Mir-X 系列


cDNA 合成 ( Real Time PCR 專用 )

## PrimeScript™ RT Reagent / Master Mix

- 37°C 處理 15 分鐘，迅速合成 cDNA
- 達 pg 等級的靈敏度
- 適用樣品廣，細胞、病毒、組織都適用
- 後續相容各大廠牌的 qPCR Master Mix

和他牌競品相比，PrimeScript 更能  
輕鬆對付強二級結構的 RNA

貨號	品名	包裝
RR037A	PrimeScript™ RT Reagent Kit	200 Rxns
RR037B	(Perfect Real Time)	800 Rxns
RR036A	PrimeScript™ RT Master Mix	200 Rxns
RR036B	(Perfect Real Time)	800 Rxns

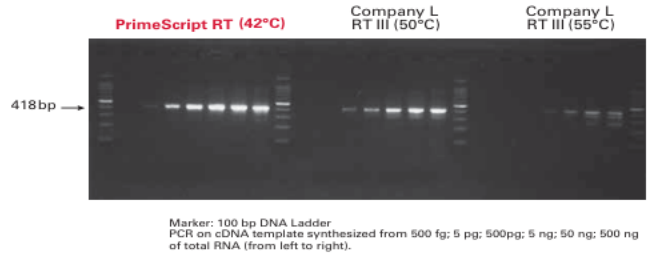


miRNA 反轉錄

## Mir-X™ miRNA First Strand Synthesis Kit

- 一個步驟、單管反應，即可反轉錄 miRNA
- 一次反應的 cDNA 可進行 50 次 SYBR qPCR
- 僅需自行準備一股 miRNA sense primer


定量 Let7 miRNA variants  
可精確分辨單一核酸的差異

貨號	品名	包裝
638313	Mir-X™ miRNA First Strand	20 Rxns
638315	Synthesis Kit	60 Rxns

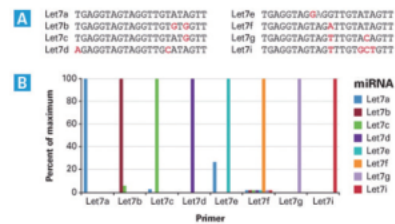

## 腺相關病毒週邊工具 AAV tools

適合安全要求高的體內基因編輯

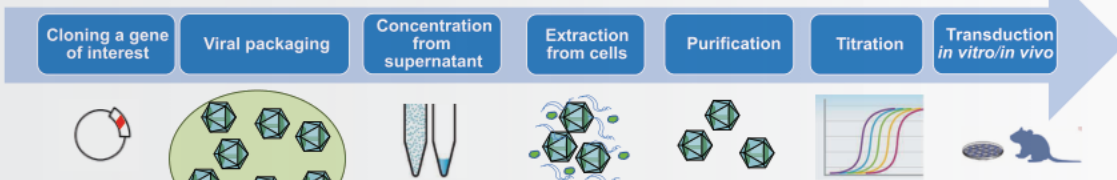

索取 AAV 完整流程

- CMV promoter
- Tet-inducible
- CRISPR/Cas9
- CRISPR/saCas9
- CRE recombinase
- ZsGreen1 reporter
- Beta-gal reporter

- AAVpro® Helper Free Systems (AAV1/2/5/6)
- AAVpro® 293T Cell Line
- AAV Packaging SingleShots (2/8/9)
- BacPAK BaculovirusGoStix Plus

- AAVpro® Concentrator #6674
- AAVpro® Cell & Sup.Extraction/Concentration Pack Maxi (All Serotypes) #6677
- AAVpro® Purification kits (All Serotypes) #6675/6666/6676

- AAVpro® Titration Kit(for Real Time PCR) Ver.2 #6233
- AAV GoStix Plus (AAV2/8/9) #631493/4/5
- AAV ELISA Rapid Titer Kit (Single Wash) (AAV2/8/9) #631485/6/7

百元加購





**ZYMO RESEARCH**  
The Beauty of Science is to Make Things Simple™


# Direct-zol 系列

## RNA LUCKY 7

7分鐘  
萃取

7月  
限定


77折  
優惠

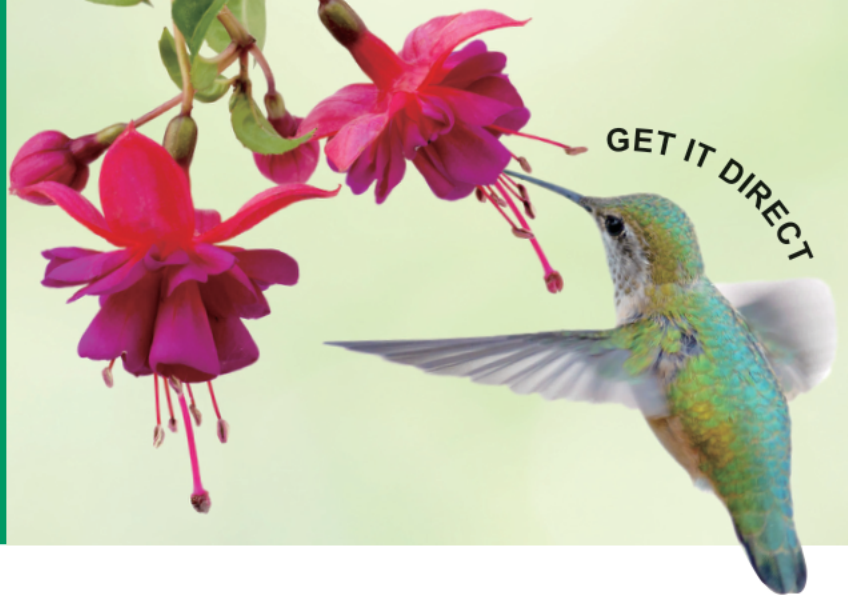

RNA 萃取 | 細胞、組織樣本適用

## Direct-zol RNA Kits

- 適用保存於 TRIzol 或 TRI reagent 的樣品
- 無需分層處理、無酒精沉澱，7分鐘完成實驗
- 可萃取 total RNA (含 small RNA, miRNA)
- NGS 等級，無 phenol 干擾、無 gDNA 污染

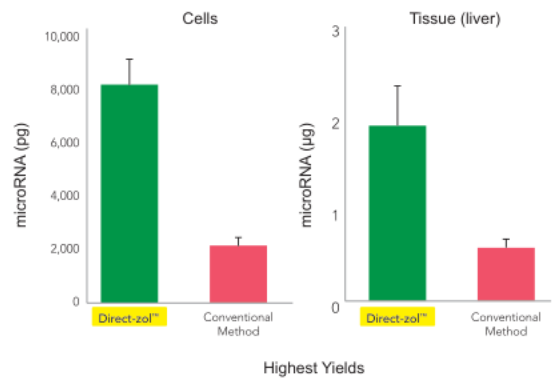

品名	貨號	包裝	RNA 總量	回溶體積	說明
Direct-zol RNA Microprep	R2060, R2061*	50 Preps	10 µg	6 µL	Cells ≤ 10 <sup>6</sup> , Tissue ≤ 5 mg
	R2062, R2063*	200 Preps			
Direct-zol RNA Miniprep	R2050, R2051*	50 Preps	50 µg	25 µL	Cells ≤ 5 x 10 <sup>6</sup> , Tissue ≤ 25 mg
	R2052, R2053*	200 Preps			
Direct-zol RNA Miniprep Plus	R2070, R2071*	50 Preps	100 µg	50 µL	Cells ≤ 10 <sup>7</sup> , Tissue ≤ 50 mg
	R2072, R2073*	200 Preps			
Direct-zol-96 RNA	R2054, R2055*	2 x 96 Preps	10 µg	50 µL	適用於自動化機器 (96 well), Cells ≤ 10 <sup>6</sup> , Tissue ≤ 5 mg
	R2056, R2057*	4 x 96 Preps			
Direct-zol-96 MagBead RNA	R2100, R2101*	1 x 96 Preps	10 µg	50 µL	適用於自動化機器 (MagBead), Cells ≤ 10 <sup>6</sup> , Tissue ≤ 5 mg
	R2102, R2103*	4 x 96 Preps			


\*含 TRI Reagent

熱賣系列 | RNA clean up

## RNA Clean & Concentrator Kits (RCC)

8折

- 純化的過程簡單並快速，10分鐘即可得到 Ultra-Pure RNA
- 高回收率可達 >90%，適用 RNA 長度為 16 bp 以上皆可
- 回溶體積最小至可達 6 µL，可濃縮至高品質 RNA
- 可直接上機進行後續實驗 (NGS、RT-qPCR、hybridization... 等)

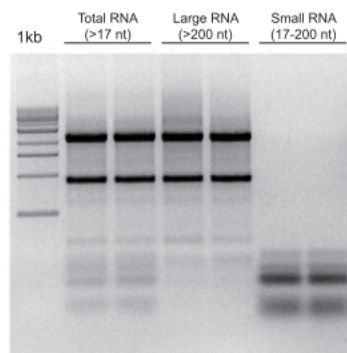

貨號	品名	包裝	Binding capacity	Minimum Elution
R1013/R1014	RNA Clean & Concentrator-5 (with DNase I Set)	50 preps/200 preps	10 µg	≥ 6 µL
R1015/R1016	RNA Clean & Concentrator™-5	50 preps/200 preps	10 µg	≥ 6 µL
R1017/R1018	RNA Clean & Concentrator™-25	50 preps/100 preps	50 µg	≥ 25 µL

百元加購





# ExoQuick exosome precipitation

1 件 8 折 / 2 件 75 折


原理：利用 polymer 形成的網狀物來沉澱 40 – 200 nm 的 particles (extracellular vesicles; EVs)

- 簡單：不需費時的超高速離心
- 最多：回收最多量 EVs，citation 數量最多
- 完整有活性：EVs 形態完整且具有生物活性
- 進階：進階版 ExoQuick Ultra，可得到更純的 Exosomes

樣品：試劑  
**5:1**  
用量超省



## The ExoQuick-TC ULTRA Workflow

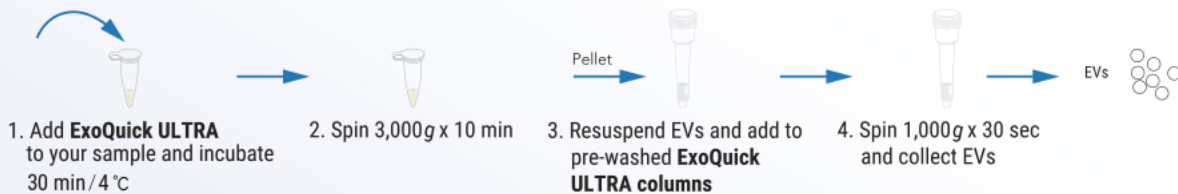

貨號	品名	包裝	適用樣品	特色
EXOQ5A-1/ EXOQ20A-1	ExoQuick exosome precipitation solution	5 mL / 20 mL	Serum, plasma & ascites	一般 EVs 的純化
EXOTC10A-1/ EXOTC50A-1	ExoQuick-TC exosome precipitation solution	10 mL / 50 mL	All other biofluids & cell culture medium	
EXOLP5A-1	Exo-Quick-LP	5 Rxns	Plasma/serum	移除 lipoproteins，適合分析來自血樣 EVs miRNA
EXOQ5TM-1	ExoQuick Plasma prep	75 Rxns	De-fibrinates plasma	利用 Thrombin 移除 fibrin，減少汙染物
EQUltra-20A-1	ExoQuick ULTRA	20 Rxns	Serum, plasma & ascites	利用 Resin 移除 protein contamination，提高 EVs 純度，適合 Proteomics 分析
EQUltra-20TC-1	ExoQuick-TC ULTRA		All other biofluids & cell culture medium	


# Exo-Fect series




1 件 8 折 / 2 件 75 折

- 流程快速簡單，1.5 小時即可完成
- 無毒性，輕鬆將 DNA、RNA、小分子藥物送入 Exosomes
- 通用型：Exo-Fect Exosome Transfection Kit (EXFT10A-1)
- siRNA/miRNA 專用型：Exo-Fect™ siRNA/miRNA Transfection Kit (EXFT200A-1)

成功遞送 siRNA 效率超過 9 成

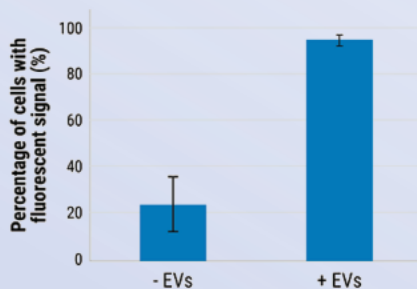

不影響細胞存活，有效抑制目標 mRNA 表現

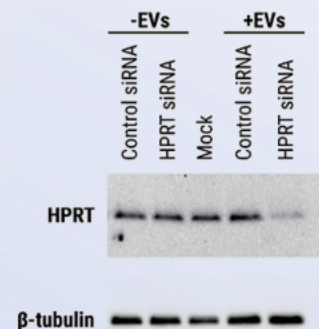



歡迎洽詢當區業務預約 Demo

# Western Blot Imaging System Signal-Direct Imager

WB 影像擷取 就像拍照一樣簡單  
台灣半導體 × 光電技術開發


- 定量準確  
符合科學出版
- 線性範圍廣  
避免訊號飽和
- 高靈敏度  
直接偵測
- 高效簡單  
一鍵成像
- 體積小巧  
不占空間



280 mm x 250 mm x 53 mm

## Western Blot 好物推薦

### Marker

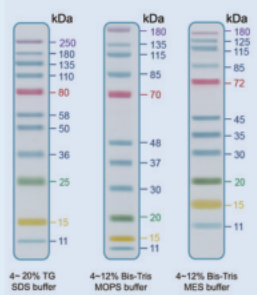

### Substrate



- 無需優化，無痛替換
- 高靈敏度與長效化學發光
- 兼容 PVDF/Nitrocellulose 膜
- Signal Direct Imager、膠片與 CCD 影像系統皆 OK



貨號	品名
PMX11-0500	NEXT 11 Prestained Protein Ladder (11 bands, 5 colors, 11-250 kDa)
CCH321-B100ML	UltraScience Pico Plus Western Substrate 50ml +50ml
CCH345-B100ML	UltraScience Pico Ultra Western Substrate 50ml +50ml
CCH375-B100ML	UltraScience Femto Plus Western Substrate 50ml +50ml

百元加購



百元加購



轉漬 / 電泳產品可申請試用~

## TE22S 小型濕式轉漬槽 30,000 元


#TE22S

可同時轉漬 4 片小型膠片 (最大尺寸為 9 x 10 cm)




## 凡購買 TE22S 可享 SE260 小型直立電泳槽組 20,000 元 加購價

#SE260C-10A-1.0

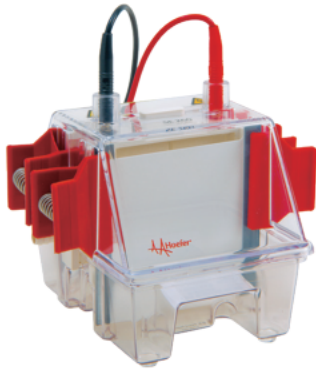


可加購多種規格配件

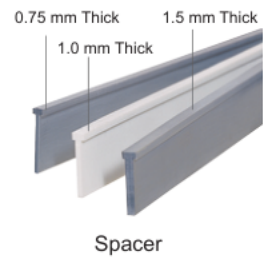

買就送限量好禮


購買以上任一品項 就 **送** 兩盒預鑄膠 (10 片 / 盒)

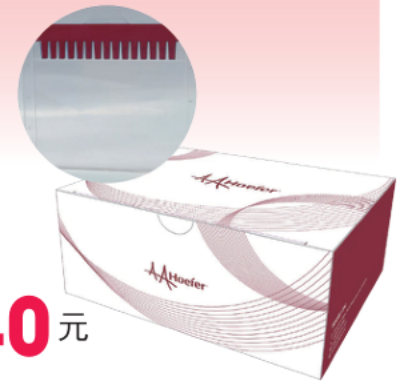

高解析度

高穩定性

## Mighty Small precast gels 促銷價 1,440 元

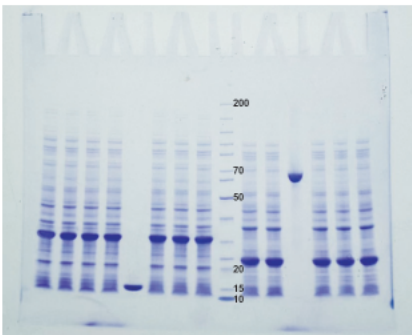

Hoefer Precast Gels (4-12%, MOPS Buffer)

- 膠片大小：8.5 x 7 cm, 厚度 1 mm
- 卡夾大小：10 x 8 cm
- Buffer：MOPS-SDS running buffer
- Wells：12-well, 15-well
- 可相容 Hoefer、Bio-Rad、Merck、Thermo 等多種垂直電泳槽
- 儲存溫度：2-8°C，請勿冷凍

貨號	品名	包裝
MSG412T	Mighty Small precast gels, 4-12% Bis-Tris, 12 wells	10 pcs/box
MSG420T	Mighty Small precast gels, 4-20% Bis-Tris, 12 wells	10 pcs/box
MSG412F	Mighty Small precast gels, 4-12% Bis-Tris, 15 wells	10 pcs/box
MSG420F	Mighty Small precast gels, 4-20% Bis-Tris, 15 wells	10 pcs/box



## 蛋白質實驗工具

### 蛋白酶 & 磷酸酶抑制劑

■ 提供 Liquid 以及 lyophilized 型式

1 件 **85** 折 / 買 2 送 1

全面性  
防護

多種  
選擇

#### Protease Inhibitor Cocktail

貨號	Serine proteases	Cysteine proteases	Aspartic proteases	Aminopeptidases proteases	Metalloproteases	Recommended reaction conditions
539131	++	++			+	100X
539134	+++	++	+	+		100-2000X
539137	+	++				100X

#### Phosphatase Inhibitor Cocktail

貨號	Acid phosphatase	Alkaline phosphatase	protein tyrosine phosphatases (PTPs)	Serine/threonine phosphatases	Recommended reaction conditions
524625	+	++	+		100X
524629	+	+	+	++	50X

品項有不同大小包裝，請洽詢當區業務

## 蛋白定量工具


**9** 折

	Bradford Reagent #B6916-500ML	BCA Protein Assay Kit #71285-3CN
反應波長	<b>595 nm</b>	<b>562 nm</b>
主要優勢	反應迅速、耐還原劑	靈敏度高、耐去污劑
還原劑相容性	優 ( 如 1M 2-ME )	低 ( 易干擾反應 )
去污劑相容性	低 ( 高濃度會干擾 )	高 ( 可耐受 5% SDS/Triton )
作用條件	室溫 (5-45 min)	37°C 孵育 30 分鐘 / 60°C 孵育 10 分鐘
使用方法	Bradford Reagent = 1:30 混和均勻	Working solution = 1:20 混和均勻

## BioTracker 活細胞分子探測工具


**85** 折

ATP-Red (10 μM)      Mito-Tracker Green (0.25 μM)

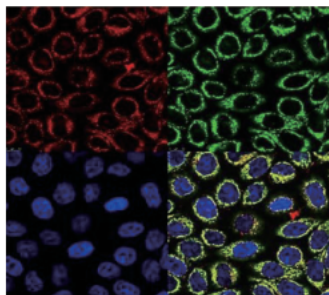

DAPI

Merged

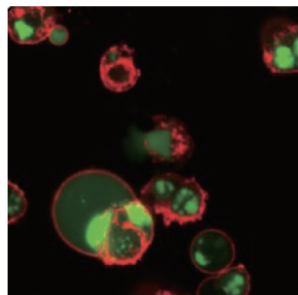

BioTracker™ NucView® 488 Green Caspase-3 Dye and CF™ 594 Annexin V (Red)

更多產品資訊  
SCAN HERE ▶



百元加購





## Protein A/ G 重組蛋白磁珠 &amp; Agarose beads

9折

應用	磁珠	Agarose
免疫沉澱 (IP)	<b>PureProteome</b> ■ 磁珠表面以 polymeric 處理，減少非專一性蛋白鍵結	■ 經濟實惠，適合大量 IP 需求 ■ 應用性廣，適用免疫沉澱與抗體純化 ■ Fast Flow 為 FPLC 純化方法的理想選擇，可承受更高的壓力

貨號	品名	包裝
LSKMAGA10	PureProteome Protein A Magnetic Beads	10 mL
LSKMAGG10	PureProteome Protein G Magnetic Beads	10 mL
LSKMAGAG10	PureProteome Protein A/G Magnetic Beads Mix	10 mL
16-125	Protein A Agarose	10 mL
16-266	Protein G Agarose	10 mL

應用	磁珠	Agarose
染色質免疫沉澱 (ChIP)	<b>Magna ChIP®/ RIP® / 專用</b> ■ 高親和性：高度結合效能 (binding capacity) 再現性佳	■ 專一性高：磁珠表面以 polymeric 處理，避免物質卡在磁珠的孔洞裡，有效減少非專一性蛋白鍵結

貨號	品名	包裝
16-661	Magna ChIP® Protein A Magnetic Beads	50 Rxn
16-662	Magna ChIP® Protein G Magnetic Beads	50 Rxn
16-663	Magna ChIP® Protein A/G Magnetic Beads	50 Rxn
16-157	Protein A Agarose/Salmon Sperm DNA	2.5 mL
16-201	Protein G Agarose/Salmon Sperm DNA	2.5 mL

尚有 Magna RIP® 產品可供參考，詳情請洽當區業務

## 驚喜加碼

凡購買任一磁珠產品

▶ 即可以 **5** 折加購磁座

#20-400



凡購買任一 IP 產品

▶ 即可以 **75** 折加購

#12-370/12-371



Normal Rabbit IgG  
#12-370

Normal Mouse IgG  
#12-371

## Isotype Control

使用 Normal IgG 可監測實驗流程中是否存在針對該物種 IgG 的交叉反應，在 IP 實驗中，Normal IgG 扮演重要的角色，它是判斷實驗結果真偽的「金標準」。



# 凡購買以下任一 IHC 系列產品

即可半價加購 Hematoxylin solution modified acc. to Gill III  
(#1.05174.0500)

IHC 免疫組織染色 明星商品

85折

IHC Select<sup>®</sup> HRP/DAB 免疫組織染色試劑組

#DAB500/DAB150

- 組織和細胞免疫染色都適用
- 內含 goat anti-mouse, goat anti-rabbit 兩支抗體，可搭配鼠源及兔源一抗使用
- 冷凍切片和石蠟切片的樣本都可使用
- 內含 Hematoxylin 可進行複染，標定細胞核的型態



染劑 (H&E stain)

9折

Hematoxylin solution modified acc. to Gill II (進染) #1.05175

Hematoxylin solution modified acc. to Gill III (退染) #1.05174

Eosin Y-solution 0.5% alcoholic #1.02439

Eosin Y Solution with Phloxine #HT110316-500ML

封片膠



Entellan<sup>™</sup> new #1.07961

Neo-Mount<sup>™</sup> #1.09016

Fluoroshield<sup>™</sup> with DAPI #F6057-20ML

Fluoroshield<sup>™</sup> #F6937-20ML

脫蠟 & 包埋



Neo-Clear<sup>™</sup> #1.09843

Millicell<sup>®</sup> EZ -SLIDE

8折

細胞直接在玻片上生長、固定與染色，無需轉移

	4 wells	8 wells
貨號	PEZGS0416	PEZGS0816
細胞生長範圍 / well (cm <sup>2</sup> )	1.7	0.7
培養基容量 (mL)	0.5-1.7	0.2-0.7



百元加購





# Defining the New Dimension of 3D Culture

9折



## Xeno-free medium Rocketcell

- 無動物來源成分
- 3D 培養試劑 All-in-one
- 高再現性 / 穩定性
- 優異細胞存活率 / 生長密度
- 適用於多種幹細胞與類器官



## CytoGrow™ Growth Factors

- 多樣宿主來源重組蛋白
- 批次之間穩定一致
- 真實驗證與專家信賴



## VitroGel® Hydrogels

- 人工合成，無批次間差異
- 室溫即可操作，簡單方便
- 可調節膠軟硬度
- 可作為注射水凝膠，適用於體內研究




## VitroGel® Organoid Recovery Solution

- 非酵素型，室溫下操作 15 分鐘內完成回收
- 高細胞存活率及回收率
- 適用於 VitroGel 與動物性 ECM



## Cyto3D® Live-Dead Assay Kit

- 無須預混，一步驟染色
- 使用 AO/PI 雙螢光系統檢測
- 適用於 2D 和 3D 培養的細胞

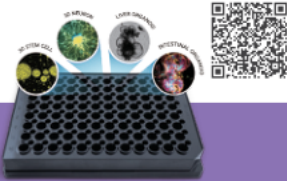

## VitroPrime™ 3D Culture Vessels

- 零干擾培養基置換
- 防旋轉 / 抗移位技術
- 光學級玻璃底層



## Xeno-free Bioinks VitroINK®

- 無須 UV、溫度、pH 固化或是化學交聯
- 無異源成分，品質穩定性高
- 適用細胞附着、基質相互作用及增殖等應用



為你的福利加碼  
— LINE@ 會員招募中 —

月月抽好禮 滿額滿件贈 互動回饋抽 神秘活動 超低優惠價




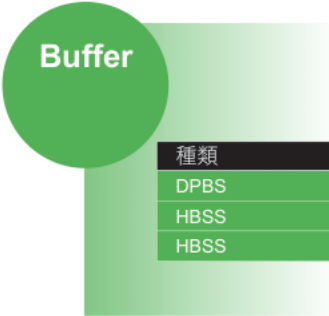

各樣促銷活動、新品訊息、新知講座不漏接

立即和我們 LINE 在一起!



## 精選細胞培養試劑

任選 **5** 瓶 **3,700** 元 / 買 **10** 瓶 再送 **1** 瓶

Medium	Buffer	Others
 <p>種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DMEM</li> <li>DMEM/F-12</li> <li>MEM/MEM <math>\alpha</math></li> <li>RPMI 1640</li> </ul>	 <p>種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DPBS</li> <li>HBSS</li> <li>HBSS</li> </ul>	 <p>種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trypsin-EDTA Solution</li> <li>Penicillin-Streptomycin Solution 100X</li> <li>Sodium Bicarbonate Solution</li> <li>Sodium Pyruvate Solution</li> <li>L-Glutamine Solution 100X</li> <li>Water for Molecular Biology, DNase, RNase, Protease-Free, Not DEPC Treated</li> </ul>

## 全系列 DMSO 100 mL 熱賣品 現貨供應

品牌			
貨號	#DMS-001-100ML	#410302	#D2650-100ML
等級	RUO	GMP	RUO
優惠價	<b>2,000</b> 元	<b>5,000</b> 元	<b>13,000</b> 元

## MPi 黴漿菌系列

**85** 折

環境  
預防

**Myco-Out**  
**Mycoplasma Removal Spray** #093050853


5-10 分鐘即可起效



檢測

**Myco-Visible**  
**Mycoplasma Rapid Test Kit** #093050901

45 分鐘完成黴漿菌檢測

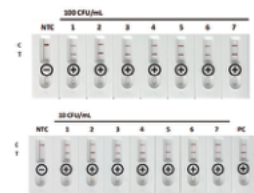

清除

**Mycoplasma**  
**Removal Agent (MRA)** #093050044

一周內清除黴漿菌汙染



百元加購



加碼送 黴漿菌急救包：買**檢測** + **清除**各一，再送**預防 (450 mL)**



ZENOGEN PHARMA

高品質 細胞 / 組織凍存液

**RUO grade 廣用型 - 適用多款細胞凍存、原代細胞凍存**

日本市佔率第一

文獻引用數多

細胞功能維持完整

可直接儲存在 -80 °C



**CELLBANKER®1**

20 mL/ 100 mL

含 ≤ 80%

Bovine serum



**CELLBANKER®2**

100 mL

不含血清

適合無血清培養環境

適合蛋白質表達細胞

**GMP grade 幹細胞 & 免疫細胞專用 ( 可用於細胞治療相關研究 )**

Xeno-free

Serum-free

Chemically defined

**STEM-CELLBANKER®**

20 mL/ 100 mL



凍存 iPSC、MSC、  
ESC、PBMC、  
Organoid、tissue 效果好

**STEM-CELLBANKER® DMSO Free**

20 mL/ 100 mL



不含 DMSO  
對細胞傷害降到最低

**STEM-CELLBANKER® EX**

100 mL



所有成分皆已用於靜脈注射  
凍存 HSC、ADSC 效果好



#SCR005 100 mL

**Accutase cell detachment solution**

溫和分離細胞與介質



**凍存優惠 3 選 1**

❶ RUO 凍存液 100 mL + Accutase 100 mL or Trypan Blue solution #T8154-100ML 合購價 \$ **6,000** 元

❷ GMP 凍存液 100 mL + Accutase 100 mL or Trypan Blue solution #T8154-100ML 合購價 \$ **11,000** 元

❸ 買 5 瓶 RUO 或 GMP 凍存液 100 mL 送 1 個 Corning® COOLCELL

● #432001 ● #432002 ● #432003 ● #432004





CORNING

## CoolCell 細胞凍存盒

- 專利技術：專利鋁合金，微對流散熱技術，導冷熱快、散熱慢
- 不需預冷，不需填充 Isopropanol，提高細胞存活率
- 穩定降溫：於 -80°C 冰箱中可 1°C / min 降溫
- 最快只需 4 小時，即可將細胞冷凍小管移至液態氮中
- 專利冷凍盒，不會凍傷雙手

可快速  
重複使用

5 分鐘後可再次使用

## 無異丙醇

- 無液體
- 不需預冷
- 每年可省下 12 升 / 單位的異丙醇

## 蓋子無卡榫

- 冷凍後，符合人體工學的蓋子容易開啟
- 從冷凍櫃中取出時，觸碰外盒手感不冷

## 無持續成本

- 無異丙醇購買或處置廢液問題

## 無變異性

- 所有凍管皆維持一致的降溫速率
- 徑向對稱設計可確保其再現性

廣受好評

## CoolCell LX Cell Freezing Containers 12 孔



驚爆價 \$ **7,400** 元 再送 TPP 89020-1 1.5 mL 細胞凍管 (100/ 包) 一包

CoolCell FTS30 High-Capacity Cell  
Freezing Containers 30 孔

驚爆價 \$ **18,900** 元 再送 TPP 89020-1 1.5 mL 細胞凍管 (100/ 包) 一包

生技公司愛用

## CoolCell LX Cell Freezing Containers



驚爆價 \$ **9,900** 元 再送 TPP 89050-1 4.5 mL 細胞凍管 (100/ 包) 一包

# CORNING

## CoolBox 冷卻冷凍保存盒

- 無需冰塊和電力，即可長時間維持低溫
- 輕便、易攜帶、不會打破
- 多種溫控模式



CoolBox



+ CoolRack



- 開蓋情況下，可保冷 10 小時
- 密閉情況下，可保冷長達 16 小時

## CoolBox XT

#432021 ● #432023 ●  
#432022 ● #432024 ●

內：14.0 x 9.4 x 9.9 cm  
外：20.0 x 16.0 x 15.0 cm



內含 1 個 4°C Cooling Core

+ CoolRack M6 (6.0 x 4.3 x 3.8 cm) \$ 22,999 元



+ CoolRack M15/CF15 (10.2 x 6.4 x 3.8 cm) \$ 25,999 元



+ CoolRack M24/CF24 (12.8 x 8.5 x 3.8 cm) \$ 30,999 元



+ CoolRack PCR (12.7 x 8.6 x 2.5/12.7 x 8.6 x 3.8 cm) \$ 31,999 元



+ CoolSink XT96F Flat Bottom Plate (12.7 x 8.6 x 2.5/12.7 x 8.6 x 3.8 cm) \$ 30,999 元



百元加購



全新升級

PARSE BIOSCIENCES

# 無需儀器的秘密 → 組合條碼技術 Evercode WT V4 試劑




樣本固定保存

Barcoding

回收率更高

流程更簡便

數據分析一鍵 OK

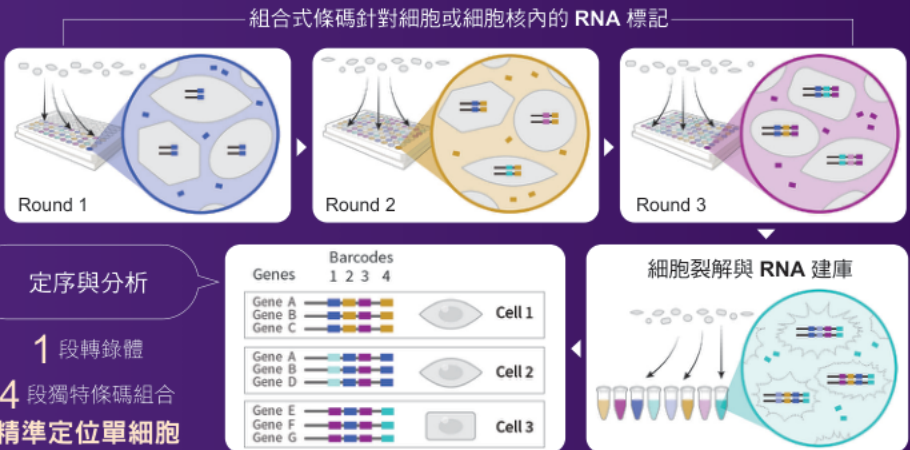

原理比較	Evercode WT V4 (組合條碼)	傳統微流體液滴
特定儀器需求	無 (只需標準實驗室設備)	需購買昂貴專用儀器
樣本保存	高達六個月	需新鮮樣本
擴展性	依細胞數量最高可達五百萬顆, 細胞平均成本低	細胞上機數量, 受限於儀器晶片
基因檢測靈敏度	較高	
背景干擾	低 (檢測單一細胞內基因表現)	高 (存在液滴內的物質都會被計算為細胞基因表現)

## BluPAD Dual LED Blue/White Light Transilluminator


BIO-HELIX CO., LTD.

Blue Light  
White Light  
3 段可調光強度  
波長 470nm

B/UPAD (BP001CU)



買就送 好禮 2 選 1

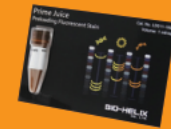

Prime Juice 15 支


或



Agarose Tablets 3 盒

買 10 支 ▶ 送 2 組

NEXT 11 Prestained Protein Ladder 買 10 支 送 2 組 UltraScience ECL Substrate 系列 (可混搭)

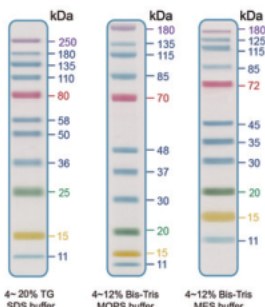

無需優化, 無痛替換  
高靈敏度與長效化學發光  
兼容 PVDF/Nitrocellulose 膜  
膠片與 CCD 成像系統 OK

貨號	品名
PMX11-0500	NEXT 11 Prestained Protein Ladder (11 bands, 5 colors, 11-250 kDa)
CCH321-B100ML	UltraScience Pico Plus Western Substrate 50ml +50ml
CCH345-B100ML	UltraScience Pico Ultra Western Substrate 50ml +50ml
CCH375-B100ML	UltraScience Femto Plus Western Substrate 50ml +50ml

百元加購



研毅企業有限公司  
ANTEC Bioscience Inc

www.antec-bio.com.tw 0800-363-666

台北 02-2758-5928 新竹 03-530-7572 台中 04-2463-8312 台南 06-336-9665 高雄 07-342-7336

A/UV260701