

CURIOSIS

FACSCOPE™ B

全自動細胞計數器

FACSCOPE B 為 CURIOSIS 公司研發製造生產

細胞利用 trypan blue 染色後，以專屬玻片送入機器內，**20 秒**即可快速得到細胞濃度、大小及存活率等相關資訊。

**20 秒
OK!**



C-Slide

ANTEC 研毅企業有限公司
Bioscience Inc. ANTEC Bioscience Inc.

www.anteq-bio.com.tw
0800-363-666

台北 02-2758-5928 新竹 03-530-7572 台中 04-2463-8312 台南 06-336-9665 高雄 07-342-7336

U/A/UV100507




全自動定位

全自動XYZ平台定位，對焦擷取細胞影像。



快速呈現結果

清楚顯示細胞數量、濃度及存活率。

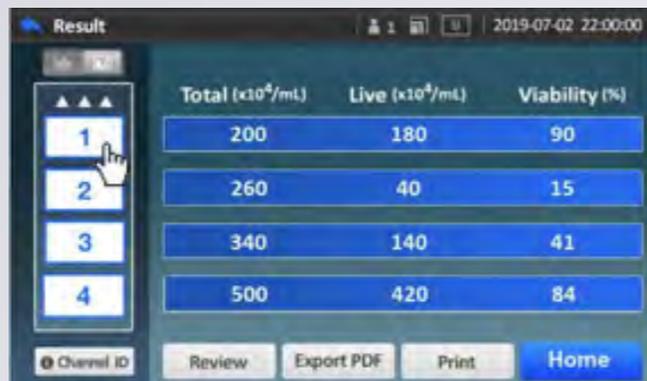

Gating 功能

細胞大小 Gating 功能，調整偵測範圍，優化計數結果。




智能計算

智能算法精確識別細胞團塊 / 不規則細胞形態。



- ✓ 儀器 IQ/OQ
- ✓ 每日儀器 QC 確效 (Standard Slide)
- ✓ 儲存不同細胞計數條件
- ✓ 一鍵輸出 PDF 計數報告
- ✓ 提供耗材 COA

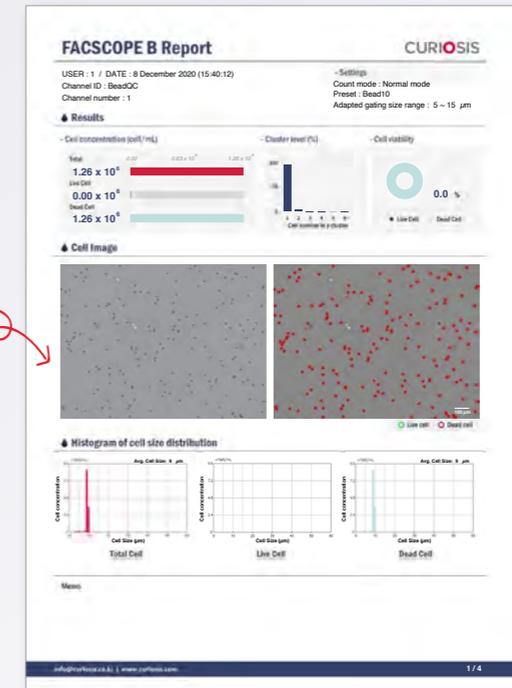

FACSCOPE™ B 專用

C-Slide 一次性細胞計數板

- 每片擁有四個檢測通道
- 通道刻有 Neubauer Improved (NI) 網格，也可用於手動計數
- 單片獨立包裝，50 片 / 盒，200Test
- 檢測體積：20 µL

