

mPAGE™ Bis-tris 預鑄凝膠片

MERCK

- 文獻等級的蛋白質电泳圖、實惠的價格
- 相容於常用的蛋白質电泳槽
- 高達 80 μ L / well 的樣本容納量
- 跑膠時間可節省最多 15 分鐘
- Bis-Tris 凝膠片及 MES / MOPS 緩衝液可維持 pH 中性環境、避免蛋白質出現修飾 (modification) 現象而劣化數據圖




超方便

好省時

高解析

mPAGE™ Tris-MOPS SDS Running Buffer, 200V

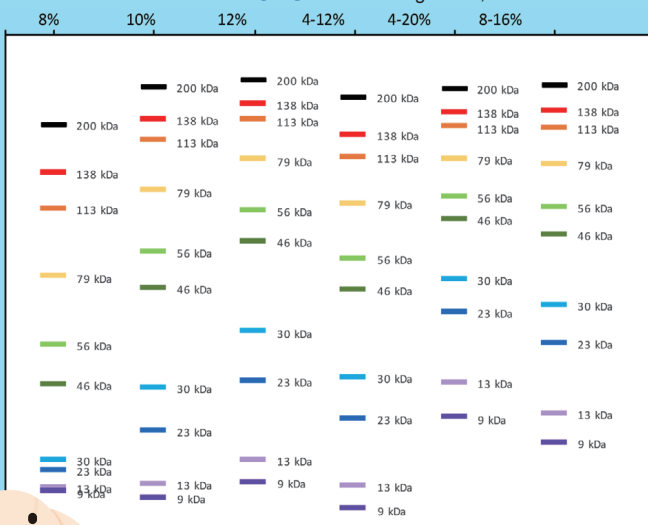

mPAGE™ Tris-MES SDS Running Buffer, 180V





MOPS SDS Running Buffer 適合分離大分子量目標蛋白，MES SDS Running Buffer 適合分離小分子量目標蛋白



研毅企業有限公司
www.antec-bio.com.tw

0800-363-666

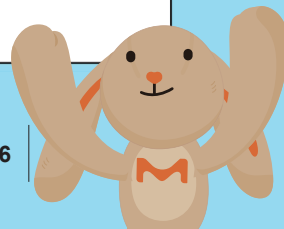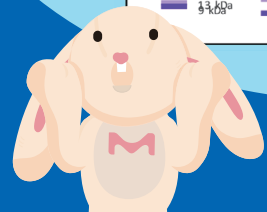

mPAGE™ 系列產品

膠片濃度	Well 數	貨號	包裝
4-12%	10-well	MP41G10	10 gels (10x8 cm)
	12-well	MP41G12	
	15-well	MP41G15	
4-20%	10-well	MP42G10	
	12-well	MP42G12	
	15-well	MP42G15	
8-16%	10-well	MP81G10	
	12-well	MP81G12	
	15-well	MP81G15	

膠片濃度	Well 數	貨號	包裝
8%	10-well	MP8W10	10 gels (10x8 cm)
	12-well	MP8W12	
	15-well	MP8W15	
10%	10-well	MP10W10	
	12-well	MP10W12	
	15-well	MP10W15	
12%	10-well	MP12W10	
	12-well	MP12W12	
	15-well	MP12W15	




品名	貨號	包裝
mPAGE™ 4X LDS Sample Buffer	MPSB-10ML	10 mL
mPAGE™ 4X LDS Sample Buffer	MPSB-250ML	250 mL
mPAGE™ MES SDS Running Buffer Powder	MPMES	5 packets (1Lb/ packet)
mPAGE™ MOPS SDS Running Buffer Powder	MPMOPS	5 packets (1Lb/ packet)
mPAGE™ Transfer Buffer Powder	MPTRB	10 packets (1Lb/ packet)

鑄膠台

電泳槽

轉漬槽

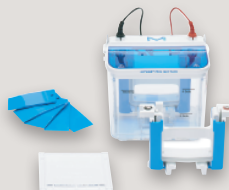

WB
好物推薦