


KAPA PROBE FAST qPCR Kits


精確，重複性好，適用於所有 PROBE-base qPCR 的應用

- 速度快，反應時間僅需 **40 分鐘**
- 適用 **TaqMan probe, FRET probe, Molecular Beacon** 系統
- 靈敏度高
- 專一性佳
- 可同時容納 **5 種 probe** 作用


95 °C 3min
95 °C 3sec
60 °C 30sec } 40 cycles

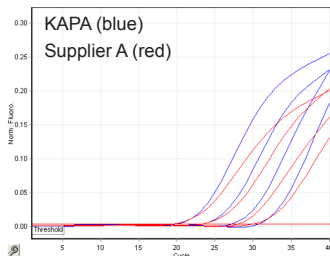

KAPA PROBE FAST

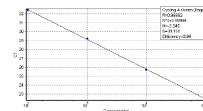

Supplier A

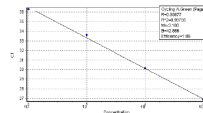

Template : human estrogen receptor (hER) 10- fold dilution (100 ng to 100 pg per reaction)

Cat No	Product	Size
KK4701	KAPA PROBE FAST Universal	1ml (100 rxns)
KK4705	KAPA PROBE FAST ABI Prism®	1ml (100 rxns)
KK4709	KAPA PROBE FAST Bio-Rad iCycler™	1ml (100 rxns)

MERCK

KAPA SYBR® FAST qPCR Kit



好評
熱銷

第一支專為 qPCR 設計的酵素

- 速度快，反應時間僅需 40 分鐘
- 螢光訊號強
- 靈敏度高
- 專一性佳
- 應用廣

螢光讀值
較高

95 °C 3min
 95 °C 3sec
 60 °C 20sec } 40 cycles

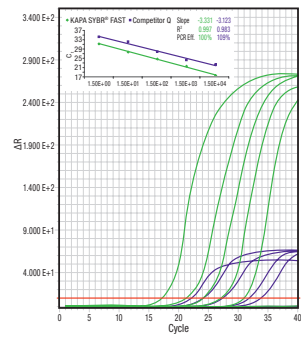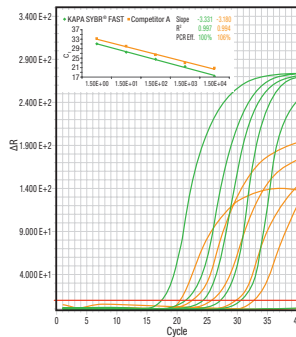

與他牌 SYBR 相比，KAPA SYBR FAST 有更高的螢光讀值。

Cat No.	Product	Size
KK4600	KAPA SYBR® FAST Universal	1ml (100 rxns)
KK4603	KAPA SYBR® FAST ABI Prism®	1ml (100 rxns)
KK4606	KAPA SYBR® FAST Bio-Rad iCycler™	1ml (100 rxns)
KK4609	KAPA SYBR® FAST for Roche® LightCycler 480	1ml (100 rxns)



研毅企業有限公司 ANTEC Bioscience Inc www.antec-bio.com.tw

台北 02-2758-5928 新竹 03-530-7572 台中 04-2463-8312 台南 06-336-9665 高雄 07-342-7336